


tediselmedical
AN EXPERT INSIGHT INTO HOSPITAL EQUIPMENT

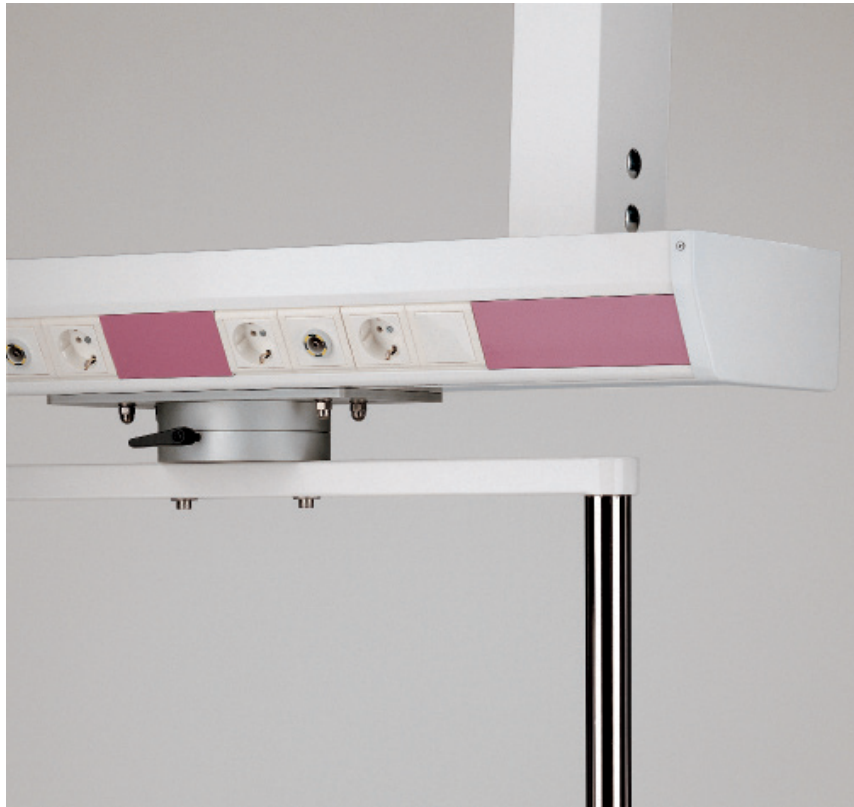

TOR

PONT MONTÉ AU PLAFOND

PONT MONTÉ AU PLAFOND



Deux poteaux intégrés pour les accessoires



Charge de haute capacité (100 kg)



Possibilité d'avoir des pôles verticaux avec une grande variété d'accessoires



Longueur et spécifications sur demande



Couleurs, HPL, Vinyle et anodisation sur demande



Peinture antibactérienne sur demande



Côtés arrondis et lignes géométriques pour un nettoyage optimal



Entretien facile



LED lighting (Direct and Indirect Light)
* Upper, Lower, Side and Night upon request



La possibilité de bénéficier de la face et du dos

TOR est fabriqué avec trois profils, divisés en trois compartiments: Prises électriques, connecteurs voix et données, éclairage direct et nocturne, gaz médicaux et descente de gouttière et lumières indirectes.



Le système de support du plafond

La durabilité est une question importante de nos jours lors de la planification et c'est pourquoi il y a de plus en plus de grandes fenêtres dans les zones d'hospitalisation où il n'est pas possible d'installer des unités de tête de lit dans le mur.

Quelques références

Hospital Quiron INfanta Luisa
Hospital San José
linique Okba-Katrouan
Centro Dialisi Ternoli

Espagne
Espagne
Tunisie
Italie



ACCESSOIRES

TOR est le système idéal à utiliser dans les unités d'hospitalisation, en particulier dans les cas où, pour des raisons structurelles, il n'est pas possible de monter les unités de tête de lit au mur. Il est également idéal pour les unités de soins néonataux et intensifs et les zones critiques en général, où l'éclairage indirect n'est pas nécessaire.



-  Rails techniques
-  Porte-Sérums et Porte-Pompes
-  Étagères et tiroirs
-  Bras Support Moniteur
-  Lampes d'examen
-  Paniers médicaux et plus
-  Tubes verticaux

QUALITÉ

Le système de gestion et les produits de Tedisel sont certifiés ISO 13485 et CE par l'organisme notificateur TÜV RHEINLAND. Tedisel, en tant que fabricant de dispositifs médicaux, possède la licence de fabricant de dispositifs médicaux numéro 6205-PS, accordée par l'Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux. Tous les

dispositifs médicaux développés et fabriqués par Tedisel sont régis par la directive européenne 93/42/CEE. Tous les équipements sont homologués et certifiés en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique, conformément aux normes ISO 11197 et EN 60601.

Tedisel Iberica S. L.
Sant LLuc, 69-81
08918 Badalona, BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
info@tedisel.com
tediselmedical.com



INF-314-FR 05/2024