


Nuestro equipo de diseñadores e ingenieros ha desarrollado el cabecero más técnico de toda nuestra gama. Un diseño vanguardista, con diferentes y singulares acabados, hacen de este producto una elección única.

ICARUS



Our designers in cooperation with an engineering partner have developed the most technological bed head unit of our range. Special design and singular finishing possibilities makes this product a daring and unique choice.

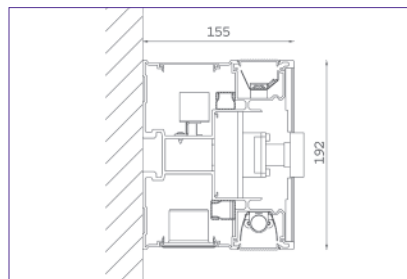

ALGUNAS REFERENCIAS:

SOME REFERENCES:

Hospital Santa Maria , Lleida- España
Hospital General Vall d'Hebron, Barcelona - España
Diplasis Hospital, Greece
Horovice, Republica Checa

- Un solo perfil con compartimentos para luz lectura y mecanismos, gases medicinales y luz ambiente.
- Tarjetero para identificación de paciente y luz vigilia mediante led.
- Led tranquilizante de aviso a enfermera.
- Diseñado para albergar módulos de iluminación de fluorescencia T5 y LED.
- Difusor para la luz directa con estructura interna especial para redirigir la luz hacia el paciente.
- Diversos materiales como Corian, metacrilato o policarbonato que permiten integrar el diseño al entorno.
- Testeros redondeados sin tornillos visibles y fijados mediante imanes y un tornillo interior de seguridad.
- Puede instalarse horizontal y verticalmente y dispone de un soporte de preinstalación para facilitar el proceso.

- One aluminium profile with compartments for direct light and mechanisms, medical gases and indirect light.
- Patient identification card holder and night light (LED).
- Nurse call light (LED).
- ICARUS is suitable for T5 fluorescent lamps and LED lighting modules.
- Direct light diffuser has a special internal structure to redirect light to the patient.
- The unit is closed with magnetic rounded shape end covers and security screws.
- Can be personalized using several materials (such as Corian, HPL or polycarbonate) to adapt its design to different environments.
- It can be installed either horizontal or vertically and there is a preinstallation support for ease of installation.